




iVoice *Body*

TS-B8003



Bilancia Parlante

Talking weighing scale Báscula Hablante Pèse-personne Vocal Sprechende Waage

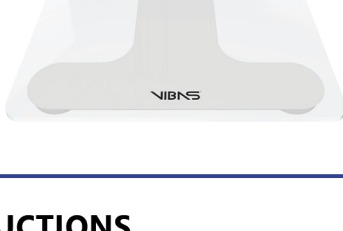

INSTRUCTIONS

UTILISATION ET MISE EN SERVICE

- Insérez les piles et respectez la polarité en faisant attention aux signes **+** et **-**.
- Pour mettre la balance en marche, il suffit de monter dessus et de procéder à la pesée.
 - Si la balance ne s'allume pas, essayez de remplacer les piles.
- Pour une précision maximale, tarez toujours la balance à l'aide du **guide rapide** fourni.
- Une fois le résultat annoncé, en restant sur la balance, le poids sera répété une seconde fois.
 - La balance s'éteint automatiquement.

COMMENT CHANGER LA LANGUE

Avec la balance allumée, appuyez sur le bouton **COMMAND** situé à l'arrière et choisissez la langue souhaitée. Une voix accompagnée d'un avertissement sonore signalera la langue choisie.



COMMENT ACTIVER OU DÉSACTIVER LES SONS ET LA VOIX

Avec la balance allumée, appuyez sur le bouton **COMMAND** derrière la balance pendant 3 secondes, une voix accompagnée d'une alerte sonore signalera l'état audio actuel.

VOIX ACTIVÉE



VOIX DÉSACTIVÉE



SIGNAL DE SURCHARGE

Lorsque la balance dépasse le poids autorisé (plus de 180 kg), une voix accompagnée d'un avertissement sonore signalera la surcharge.

SURCHARGE



SIGNAL DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Lorsque les piles doivent être remplacées, une voix accompagnée d'un avertissement sonore signalera que la batterie est faible.

BATTERIE FAIBLE



CADREZ LE QR CODE POUR ÉCOUTER LES INSTRUCTIONS AU FORMAT VOCAL



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Pèse-personne vocal
- 2 Piles AAA 1,5 V
- 1 Manuel d'instructions
- 1 Guide rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: iVoice Body (TS-B8003)
Dimensions de l'échelle 30 x 30 x 2,5 cm
Capacité maximum: 180 Kg
Répartition du poids: 0,1 Kg
Piles: AAA 1,5 V type
Matériel: Verre, plastique, métal

AVERTISSEMENTS - NETTOYAGE - SOINS

- Placez la balance sur une surface dure et plane pour garantir une précision maximale.
- Nettoyez la balance avec un chiffon humide mais ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de nettoyeurs chimiques.
- Cette balance contient un système de pesage de haute précision, ne la laissez jamais tomber.
- Ne placez pas la balance à proximité d'appareils à rayonnement électromagnétique.
- Ne mélangez pas piles neuves et usagées pour faire fonctionner votre balance.

ATTENTION

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage ou la balance.
- Pour éviter de glisser, ne montez pas si le pèse-personne est humide ou si vos pieds sont mouillés.
- Ne marchez pas sur le bord extérieur de la balance d'un seul côté, risque de renversement.
- Retirez les piles si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période.
- N'exposez pas la balance à des sources de chaleur.
- Ne rechargez pas les batteries et ne les jetez pas au feu, risque d'explosion.
- Si du liquide s'échappe des piles, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.



GARANTIE

Le produit est couvert par une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication de la balance.

La garantie est nulle dans les cas suivants:

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Pour les composants sujets à l'usure.
- Responsabilité du client.
- Si l'appareil a été ouvert.



Pour réclamer la garantie pendant sa période de validité, le client doit prouver l'achat du produit. Vous pouvez faire valoir vos droits de garantie contre VIBAS dans un délai de 2 ans.

En cas de réclamation, contactez notre service d'assistance 24h / 24 au :

NUMÉRO VERT: 800 70 82 78

assistenza@vibashopping.com

+39 333 7650390



www.vibashopping.com



info@vibashopping.com



WhatsApp



Made in China

