





iVoice *Body*

TS-B8003



Bilancia Parlante

Talking weighing scale Báscula Hablante Pèse-personne Vocal Sprechende Waage

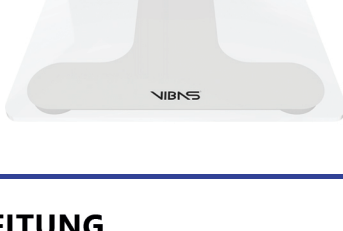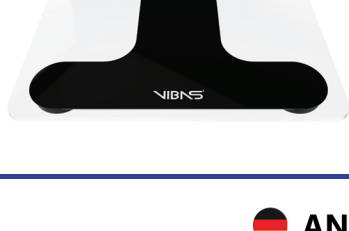

ANLEITUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein und achten Sie dabei auf die Zeichen **+** und **-**
- Um die Waage einzuschalten, gehen Sie einfach nach oben und fahren Sie mit dem Wiegen fort.
 - Wenn sich die Waage nicht einschalten lässt, ersetzen Sie die Batterien.
- Eichen Sie die Waage immer für maximale Genauigkeit nach der beiliegenden **Kurzanleitung**.

- Wenn das Gewicht angezeigt wird und der gewogene Gegenstand auf der Waage verbleibt, wird das Gewicht ein zweites Mal wiederholt.
 - Die Waage schaltet sich automatisch ab.

SO ÄNDERN SIE DIE SPRACHE

Drücken Sie bei eingeschalteter Waage die **COMMAND** auf der Rückseite und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Die gewählte Sprache wird per Sprachausgabe genannt, zusätzlich erklingt ein Hinweisston



WIE MAN SOUNDS UND DIE STIMME AKTIVIERT ODER DEAKTIVIERT

Drücken Sie bei eingeschalteter Waage **3 Sekunden** lang die **COMMAND** auf der Rückseite der Waage. Eine Sprachausgabe, die von einem akustischen Hinweisston begleitet wird, signalisiert den aktuellen Audiostatus

STIMMEAKTIVIERT



STIMMEDEAKTIVIERT



ÜBERLASTUNGSSIGNAL

Wenn die Waage das zulässige Gewicht (über 180 kg) überschreitet, signalisiert eine Sprachausgabe und ein akustischer Hinweisston die Überlastung.

ÜBERLASTUNG



BATTERIEWECHSELSIGNAL

Wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen, signalisiert eine Sprachausgabe und ein akustischer Hinweisston den Status der schwachen Batterie.

NIEDRIGER BATTERIESTATUS



SCANNEN SIE DEN QR-CODE EIN, UM SICH DIE BETRIEBSANLEITUNG ANZUHÖREN



INHALT DES PAKETS

- 1 Sprechende Waage
- 2 1,5 V AAA-Batterien
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Kurzanleitung

TECHNISCHE DATEN

Modell: iVoice Body (TS-B8003)
Maßstab 30 x 30 x 2,5 cm
Maximale Kapazität: 180 kg
Gewichtsaufteilung: 0,1 kg
1,5 V AAA Batterien
Material: Glas, Kunststoff, Metall



WARNHINWEISE - REINIGUNG - PFLEGE

- Stellen Sie die Waage auf eine harte, ebene Oberfläche, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.
- Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch, aber lassen Sie kein Wasser eindringen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Reinigungsmittel.
- Diese Waage enthält ein hochpräzises Wägesystem. Lassen Sie sie niemals fallen.
- Stellen Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten mit elektromagnetischer Strahlung auf.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen zwischen neuen und gebrauchten.

BEACHTUNG

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder der Waage.
- Wenn die Waage feucht oder Ihre Füße nass sind, betreten Sie die Waage nicht um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Treten Sie nicht nur auf einer Seite auf die Außenkante der Waage, da dies zu einem Umkippen führen kann.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird.
- Setzen Sie die Waage keinen Wärmequellen aus.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer, da dies zum Platzen führen kann.
- Wenn Flüssigkeit aus den Batterien austritt, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.



GARANTIE

Für das Produkt gilt eine 2-jährige Garantie gegen Herstellungsfehler der Waage.

Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:

- Schäden durch unsachgemäße Verwendung.
- Für Verschleißteile.
- Haftung des Kunden.
- Wenn das Gerät geöffnet wurde.



Um die Garantie innerhalb ihrer Gültigkeitsdauer geltend zu machen, muss der Kunde den Kauf des Produkts nachweisen. Sie können Ihre Gewährleistungsrechte gegenüber VIBAS innerhalb von 2 Jahren geltend machen.

Bei Beschwerden wenden Sie sich rund um die Uhr an unseren Assistenzservice unter folgenden Ansprechpartnern:

GRÜNE NUMMER: 800 70 82 78

assistenza@vibashopping.com

+39 333 7650390



www.vibashopping.com



info@vibashopping.com



WhatsApp

