




Bilancia Parlante

Talking weighing scale **Báscula Hablante** Pèse-personne Vocal Sprechende Waage

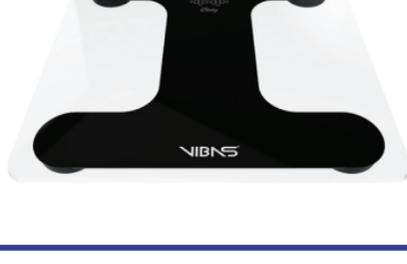

INSTRUCCIONES

USO Y PUESTA EN MARCHA

- Inserte las baterías con la polaridad correcta prestando atención a los signos + y -
 - Para encender la báscula, simplemente suba y continúe con el pesaje.
- Si la báscula no se enciende, verifique la carga de las baterías y reemplácelas es necesario.
- Siempre tare la balanza para obtener la máxima precisión, utilizando la **guía rápida** adjunta.
- Una vez que se obtenga el resultado del peso, si el producto permanece en la báscula entonces se repetirá la medida del peso de nuevo.
 - La báscula se apaga automáticamente.

CÓMO CAMBIAR EL IDIOMA

Con la báscula encendida, presione el botón COMMAND ubicado en la parte posterior y elija el idioma deseado, una voz acompañada de una advertencia sonora señalará el idioma elegido.



CÓMO HABILITAR O DESHABILITAR LOS SONIDOS Y LA VOZ

Con la báscula encendida, presione el botón COMMAND detrás de la báscula durante 3 segundos, y una voz acompañada de una alerta sonora señalará el estado actual del audio.



SEÑAL DE SOBRECARGA

Quando la báscula excede el peso permitido (más de 180 kg), una voz acompañada de una advertencia sonora señalará la sobrecarga.

EXCESO DE PESO



SEÑAL DE REEMPLAZO DE BATERÍA

Quando sea necesario reemplazar las baterías, una voz acompañada de una advertencia audible señalará el estado de la batería baja.

BATERÍA BAJA



MARQUE EL CÓDIGO QR PARA ESCUCHAR LAS INSTRUCCIONES EN FORMATO DE VOZ



CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Báscula con voz
- 2 Pilas AAA de 1,5 V
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Guía rápida

DATOS TECNICOS

Modelo: iVoice Body (TS-B8003)
 Dimensiones escala 30 x 30 x 2,5 cm
 Capacidad máxima: 180 Kg
 Desglose de peso: 0,1 Kg
 Pilas: AAA de 1,5 V
 Material: Vidrio, plástico, metal

AVVERTENCIAS - LIMPIEZA - CUIDADO

- Coloque la báscula sobre una superficie dura y nivelada para garantizar la máxima precisión.
- Limpiar la báscula con un paño húmedo, pero evite que el agua entre dentro de la báscula.
- Para la limpieza, evite el uso de productos químicos.
- Esta báscula contiene un sistema de pesaje de alta precisión, nunca lo deje caer.
- No coloque la báscula cerca de dispositivos con radiación electromagnética.
- No utilice diferentes tipos de pilas entre las nuevas y las usadas.

ATENCIÓN

- Nunca deje a los niños sin supervisión con el material de embalaje o la báscula.
- Si la báscula está húmeda o sus pies están mojados, no suba para evitar resbalones.
- No pise el borde exterior de la báscula solo en un lado, riesgo de vuelco.
- Quite las pilas si la báscula no se usa durante mucho tiempo.
- No exponga la báscula a fuentes de calor.
- No recargue las baterías ni las arroje al fuego, riesgo de explosión.
- Si sale líquido de las baterías, evite el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas.



GARANTÍA

El producto está cubierto por una garantía de 2 años contra defectos de fabricación de la báscula.

La garantía queda nula en los siguientes casos:

- Daños provocados por un uso inadecuado.
- Para componentes sujetos a desgaste.
- Responsabilidad por parte del cliente.
- Si el dispositivo se ha abierto.



Para reclamar la garantía dentro de su período de vigencia, el cliente deberá acreditar la compra del producto.

Puede hacer valer sus derechos de garantía contra VIBAS dentro de un período de 2 años.

En caso de quejas, contacte con nuestro servicio de asistencia 24h / 24 en los siguientes contactos:

📞 **NÚMERO VERDE: 800 70 82 78**

✉️ asistencia@vibashopping.com

📞 **+39 333 7650390**



www.vibashopping.com



info@vibashopping.com



WhatsApp

